



Wellell Group

PRODUKTINFORMATIONEN

Apparative Intermittierende **Kompressionstherapie**
medizinische Schaumstoff- und Wechseldrucksysteme
für die Dekubitusprophylaxe und -therapie

#workgreen

www.slk-gmbh.de



#workgreen

Leitprinzip zur Nachhaltigkeit

Die SLK Medizintechnik GmbH nutzt über 80 Prozent selbst produzierten Grünstrom aus reiner Sonnenenergie für Produktion, Chemothermische Aufbereitung, Service und restlichem Energiebedarf. Diese Solarenergie wird dank einer 150 kWh starken Solaranlage bereitgestellt. Sämtliche Arbeitsabläufe sind auf maximale Effizienz zur Nutzung von Solarenergie optimiert. Damit leistet das Unternehmen schon jetzt einen signifikanten Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz.

Bereits seit 2019 wurde das gesamte Unternehmen auf Ökostrom umgestellt. SLK geht nun konsequent den nächsten Schritt und führt, unter Nutzung der regenerativen Sonnenenergie die Umstellung der Fahrzeugflotte auf Hybrid- und E-Mobilität ein. Aktuell stehen zehn E-Fahrzeuge zur Verfügung. Die Ladekapazität wurde von zwei auf sieben E-Ladestationen mit vierzehn Ladepunkten erweitert.

80% GRÜNSTROM aus reiner SONNENENERGIE

Inhaltsverzeichnis

5 Intermittierende Kompressionstherapie

- 5 - 11 SLK Varilymph 12 Pro
- 12 SLK IPC 3

13 Wechseldrucksysteme

- 14 SLK Eco 1+2
- 15 SLK Eco 3+4
- 16 SLK I
- 17 SLK II
- 18 SLK III
- 19 SLK IV
- 20 SLK Pain&Therapy
- 21 SLK KiddyCare Digital
- 22 - 23 Optima Prone
- 24 - 25 Optima Turn
- 26 - 27 Optima Auto
- 28 Sedens 500

29 XXL Schwerlast-Lagerungssysteme

- 31 SLK IV XXL 90 x 200 cm
- 32 SLK IV XXL 120 x 200 cm
- 33 SLK XXL Foam
- 34 SLK Frame

35/36 medizinische Schaumstoff- und Hybridsysteme

- 35 SLK GreenCare
- 36 SLK BlueCare
- 38 SLK NeoCare Basic / NeoCare I
- 39 SLK NeoCare II
- 40 SLK FoamCare Comfort
- 41 SLK ProfiSoft Comfort
- 42 SLK ViscoCare Comfort
- 43 SLK Silver Sleep
- 44 SLK Bi-Stretch Bezug
- 45 SLK Touch of Silver
- 46 SLK Evakuierungstuch
- 47 SLK Evakuierungsbezug

48 SLK Hygienecenter

- 49 Chemothermische Aufbereitung

Der Name SLK steht für Qualität „Made in Germany“.

Service und Kundenzufriedenheit stehen bei uns an erster Stelle.



Wer wir sind

Die SLK Vertriebsgesellschaft mbH ist ein führendes mittelständisches Unternehmen, gegründet 1998, mit Sitz in Waltrop. SLK hat Patienten und ihre medizinischen Bedürfnisse besonders im Fokus.

Was wir wollen

Bei der Entwicklung unserer Produkte legen wir Wert darauf, dass therapeutische Wirksamkeit, Anwenderfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen.

Gerade bei Medizinprodukten ist eine schnelle Lieferung und ein umfangreicher Service ein wichtiger Faktor, der oft über den Behandlungserfolg entscheidet. Aus diesem Grund werden unsere Hilfsmittel standardmäßig am Tag der Bestellung versendet. Bundesweit steht unser Außendienst den Fachhandelspartnern vor Ort und auch beim Patienten zur Seite.

Weltweit ist SLK durch Stützpunkthändler vertreten. Regelmäßige Schulungen und Trainingsprogramme sichern einen hohen Standard bei der Versorgung der Patienten.


Produktportfolio

Über Jahre hinweg wurde unser Produktportfolio in Zusammenarbeit mit Ärzten, Pflegepersonal und Fachhändlern perfektioniert und auf die Bedürfnisse der Patienten abgestimmt. Das Ergebnis sind therapeutisch hochwirksame Lagerungs- und Kompressionssysteme sowie Patientenlifter, Transfer- und Positionierungshilfen für den Einsatz in Kliniken, Pflegeinstitutionen und im Homecare-Bereich. Die Systeme zeichnen sich durch hochwertige und besonders robuste Materialien aus.

Bei Fragen zu unseren Produkten stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

#workgreen

Apparative Intermittierende **Kompressionstherapie**

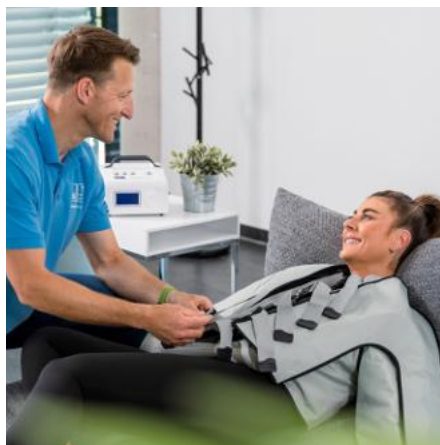

Apparative Intermittierende Kompressionstherapie

Der Einsatz von Systemen zur Apparativen Intermittierenden Kompression (AIK) ist in der modernen medizinischen Versorgung von z.B. Lymphödemen und Lipödemen Standard geworden. Ein leistungsstarker Kompressor mit einer intelligenten Steuerung sorgt für einen effektiven und gleichzeitig schonenden Abtransport von Flüssigkeit. Der Druck, Befüllungs- und Entlüftungszeit und die Therapiedauer können genau an die Patienten und deren Bedürfnisse angepasst werden. Durch die überzeugenden Behandlungserfolge setzt die Varilymph 12 Pro neue Maßstäbe in der apparativen Entstauungstherapie.

Indikationen

- Lymphödem
- Lipödem
- venöse Ödeme
- Ödem-Mischformen
- Ulcus cruris
- postthrombotisches Syndrom
- posttraumatische / postoperative Ödeme
- sensorische Störung bei Hemiplegie
- Thromboembolieprophylaxe
- diabetischer Fußdefekt
(im Rahmen eines komplexen
Behandlungskonzept)
- periphere arterielle Verschlusskrankheit
(im Rahmen eines komplexen
Behandlungskonzept)

Kontraindikationen


- dekompensierte Herzinsuffizienz
- Erysipel
- okkludierende Prozesse im
Lymphabstrombereich
- ausgedehnte Thrombophlebitis,
Thrombose oder Thromboseverdacht
- Lungenödem
- frischer Myokardinfarkt
- schwere nicht eingestellte Hypertonie

relative Kontraindikationen

- ausgedehntes, ggf. offenes Weichteiltrauma
der Extremitäten
- ausgeprägte Neuropathie der Extremitäten
- blasenbildende Dermatosen


Funktionsprinzip

Nach dem Start der Therapie werden die 12 Kammern der Behandlungsmanschette angesteuert und mit Luft befüllt (im Bild blau dargestellt).

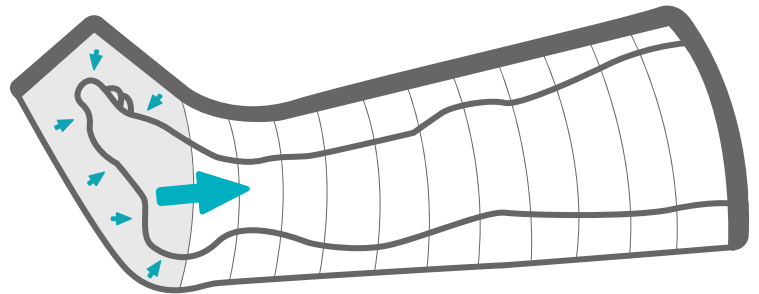

Die Dauer der Befüllung hängt neben der gewählten Befüllungszeit auch von der Anatomie des Patienten und den zu versorgenden Körperteilen ab.


Im Verlauf der Therapie werden nach und nach alle weiteren Kammern der Behandlungsmanschette befüllt. Durch diesen Prozess wird Gewebeflüssigkeit in proximaler Richtung abtransportiert (blauer Pfeil) und so das Ödem reduziert.

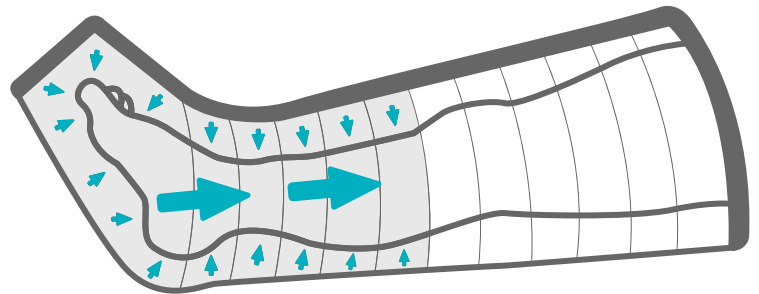

Der Druck kann genau an den Patienten und seine Indikation angepasst werden, dieser sollte durch den behandelnden Arzt vorgegeben werden.

Sind alle Kammern gefüllt, entweicht je nach eingestellter Zeit, die Luft aus allen Kammern der Manschette gleichzeitig.

Der Zyklus beginnt nach einer Pause jeweils wieder von vorne. Ein Rückstau von Flüssigkeit wird somit ausgeschlossen.

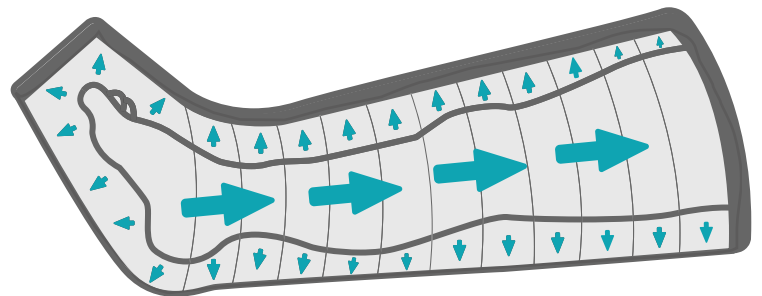

effektiver und schonender Abtransport von Flüssigkeit

Behandlungsmanschetten

Der richtige Einsatz

der Behandlungsmanschetten

Für den Erfolg der Kompressionstherapie ist die Verwendung der passenden Behandlungsmanschetten entscheidend.

Die richtige Manschette

- muss dem Bein- oder Armumfang angepasst sein
 - sollte ausreichend lang sein und die Finger / Zehen umschließen
 - Mit der Kompressionshose erzielen wir eine wichtige zusätzliche Stimulanz des Lymphsystems im Leisten-, Bauch- und Beckenbereich und eine übergangslose, optimierte und schonende Entstauung durch das vergrößerte Behandlungsgebiet. Unsere Kompressionshose hat ein anatomisch geformtes Fußteil mit wichtigem Druck unter der Fußsohle und garantiert somit u.a. eine angenehme, entspannte Lage und keine Spitzfußstellung wie in einer Röhrenmanschette.
- Für eine optimale Passform sind die Behandlungsmanschetten individuell anpassbar. Zur Verfügung stehen: Bein-, Hose-, Jacke- und Arm-Schultermanschetten mit Erweiterungssätzen.

Kompressionshose

mit verstellbarem Fußteil

normal	Artikel-ID 4031
--------	-----------------

kurz	Artikel-ID 4029
------	-----------------

mit flexiblem Fußteil / Bundweite: 140 cm

Erweiterungssatz Kompressionshose

normal	Artikel-ID 4034
--------	-----------------

kurz	Artikel-ID 4040
------	-----------------

Fußteil	Artikel-ID 4038
---------	-----------------



Beinmanschette

normal	Artikel-ID 4030
--------	-----------------

kurz	Artikel-ID 4037
------	-----------------

weit	Artikel-ID 4035
------	-----------------

Erweiterungssatz Beinmanschette

normal	Artikel-ID 4033
--------	-----------------

kurz	Artikel-ID 4039
------	-----------------



Behandlungsmanschetten

Arm-Schultermanschette

normal	Artikel-ID 4043
--------	-----------------

Kompressionsjacke Universal

Universalgröße	Artikel-ID 3083
----------------	-----------------

halbe Kompressionsjacke Universal

Halbjacke rechts	Artikel-ID 3086
Halbjacke links	Artikel-ID 3087

□ passendes Verschlusssteil ist im Lieferumfang enthalten!

Verschlusssteil für halbe Kompressionsjacke

Verschlusssteil für Halbjacke rechts	Artikel-ID 3088
Verschlusssteil für Halbjacke links	Artikel-ID 3089

Gurtverbinder für halbe Kompressionsjacke

Kompressionsjacke (komplett)	Artikel-ID 3085
------------------------------	-----------------

Erweiterungssatz Kompressionsjacke

Erweiterungssatz Arm	Artikel-ID 4070
Erweiterungssatz Rücken	Artikel-ID 4071



Maße - SLK Varilymph 12 Pro®

	× ↓	Art.-ID	Artikel	Maße			
				Länge	Umfang		
					oben ¹	mitte ²	unten ³
Steuereinheit		4000	SLK Varilymph 12 Pro Hilfsmittel-Nr.: 17.99.01.1018		Oberschenkel ¹	Knie ²	Knöchel ³
Manschetten - Standard		4030	Beinmanschette normal	81 cm	75 cm	60 cm	45 cm
		4037	Beinmanschette kurz	74 cm	70 cm	58 cm	47 cm
		4035	Beinmanschette weit	87 cm	89 cm	81 cm	72 cm
		4043	Arm-Schultermanschette	unten: 67 cm Schulter: 85 cm	Schulter oben 58 cm	Ellenbogen 53 cm	Hand 50 cm
		4031	Kompressionshose normal mit flexiblem Fußteil (Bundweite 140 cm)	ohne Fußteil 118 cm	72 cm	68 cm	60 cm
		4029	Kompressionshose kurz mit flexiblem Fußteil (Bundweite 140 cm)	ohne Fußteil 106 cm	72 cm	68 cm	60 cm
		3083	Kompressionsjacke Universal				
		3086	halbe Kompressionsjacke (rechts)				
		3087	halbe Kompressionsjacke (links)				
		3088	Verschlusssteil für Halbjacke (rechts)				
		3089	Verschlusssteil für Halbjacke (links)				
		3085	Gurtverbinder für Kompressionsjacke				
		4033	Erweiterung für Beinmanschette normal (4030)		20 cm		10 cm
Manschetten - Erweiterungen		4039	Erweiterung für Beinmanschette kurz (4037)		20 cm		10 cm
		4102	Erweiterung für Beinmanschette weit (4035)				
		4034	Erweiterung für Kompressionshose normal (4031)		21 cm		12 cm
		4040	Erweiterung für Kompressionshose kurz (4029)		21 cm		10 cm
		4038	Erweiterung für Fußteil Kompressionshose (4031 und 4029)		Knöchel 13 cm		Spann 10 cm
		4070	Erweiterungssatz Kompressionsjacke Arm		7 cm		7 cm
		4071	Erweiterungssatz Kompressionsjacke Rücken		6,5 cm		6,5 cm
Zubehör		4036	Verbindungsschläuche				
		3067	Netzkabel				

Information		Hinweis zum flexiblen Fußteil: Umfang Fußspitze: 29 cm Länge Fußteil: 30 cm Umfang Knöchel: 47 cm Höhe Fußteil: 24 cm					
		Wichtig! Bei einer nachträglichen Bestellung von Erweiterungen auf den Reißverschlusstyp achten! Spiralreißverschluss oder Krampenreißverschluss Gerne können Sie uns ein Foto des vorhandenen Reißverschlusses zukommen lassen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.					

SLK Varilymph 12 Pro®

digitales Kompressionstherapiesystem



hochwertiges Innenfutter
in allen Manschetten



verdrehssicher
konstruierter
Anschlussstecker

Fakten

- zur apparativen intermittierenden Kompressionstherapie
- zur Verwendung mit SLK 12-Kammer-Behandlungsmanschetten
- leistungsstarker Kompressor zur schnelleren Befüllung
- besonders einfache Handhabung durch verwechslungssichere Stecker bei allen Schlauchverbindungen
- schnelle und sichere Entlüftung
- umfangreiches Sortiment an Manschetten und Erweiterungssätzen
- digitale Druck- und Zeitsteuerung mit Alarmfunktion
- individuell einstellbare Druck-, Befüllungs- und Pausenzeiten

Lieferumfang

- SLK Varilymph 12 Pro® Kompressionstherapiesystem
- Netzkabel
- Verbindungsschlauch

Technische Daten / Maße

- Druckbereich: von 15 bis 80 mmHg
- Therapiedauer: von 15 bis 60 Min.
- Entlüftung: 10 bis 120 Sek.
- Befüllung: 20 bis 120 Sek.
(Befüllungs- und Entlüftungszeiten gelten jeweils für einen Zyklus)
- Maße Steuereinheit:
17 x 20 x 20 cm (H x B x T)
- max. Druck: 80 mmHg
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gewicht: 2,0 kg

Hilfsmittel-Nr.: 17.99.01.1018
Artikel-ID 4000

SLK IPC 3

3-Kammer Kompressionstherapiegerät



Konnektoren



IPC 3 Beinmanschetten
(normal/kurz)
Erweiterungssatz auf Anfrage!

Fakten

- zur Verwendung mit SLK 3-Kammer-Behandlungsmanschetten
- zur apparativen intermittierenden Kompressionstherapie
- wirksame, schnelle, schmerzlose und schonende Behandlung
- gleichzeitige Behandlung von zwei Beinen möglich
- leistungsstarker Kompressor zur schnelleren Befüllung
- automatische Unterdruckerkenung
- besonders einfache Handhabung durch verwechslungssichere Stecker bei allen Schlauchverbindungen
- Abschaltautomatik

Lieferumfang

- SLK IPC 3 Steuergerät inkl. Blindstopfen




Technische Daten / Maße

- Druckbereich: von 20 bis 60 mmHg
- Therapiedauer: von 20 bis 60 Min.
(jeder begonnene Zyklus wird komplett beendet)
- Zykluspause: 20 bis 45 Sek.
- Maße Steuereinheit:
16,5 x 29 x 12,5 cm (H x B x T)
- max. Druck: 60 mmHg
- max. Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gewicht: 1,8 kg

Hilfsmittel-Nr.: 17.99.01.1027

Artikel-ID (3100), SLK IPC 3 Beinmanschette kurz (3110), normal (3111)

Wechseldrucksysteme
medizinische Schaumstoff- und Hybridsysteme
für die Dekubitusprophylaxe und -therapie

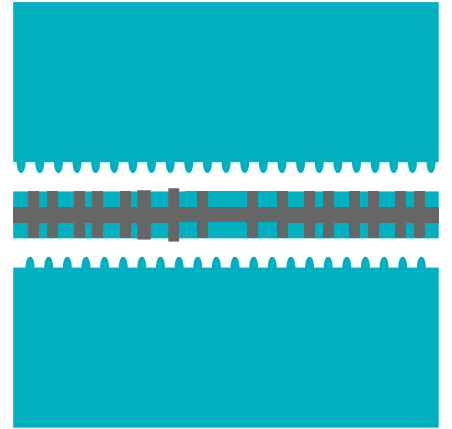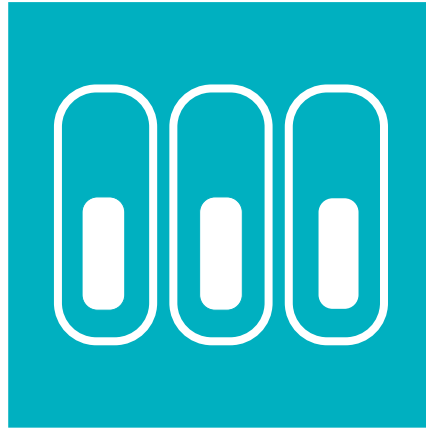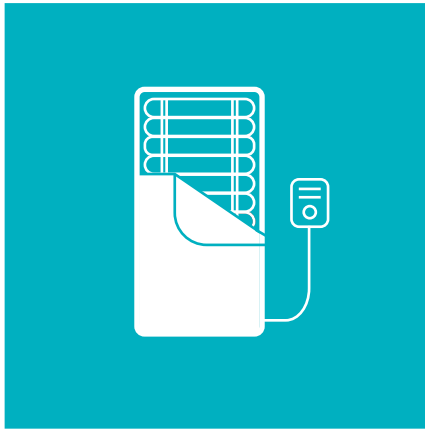

SLK ECO 1+2

Wechseldrucksystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



Polyurethanzellen



SLK Care-Textm Bezug,
CPR-Funktion

Fakten

- Patientengewicht: 30 - 140 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 2
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- großzelliges Matratzenaufлагesystem
- 17 Nylon-beschichtete Polyurethanzellen
- Statikfunktion zur regelbaren Weichlagerung
- akustischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- SLK Care-Textm Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- Desinfektionsmittelbeständigkeit
- flüssigkeitsundurchlässig
- Bezug ist bis 60 °C waschbar
- CPR-Funktion zur Reanimation
- optional: SLK Frame im Standardmaß/Sondermaß (siehe S. 34)

Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit:
15 x 30 x 9 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm
- Höhe: 14 cm
- max. Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 5,7 kg

Lieferumfang

- SLK Eco 1+2 Auflage inkl. Steuereinheit und SLK Care-Textm Bezug

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.04.1018
Artikel-ID 1781 (90 x 200 cm)


Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

SLK ECO 3+4

Wechseldrucksystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



Luftstromzellen

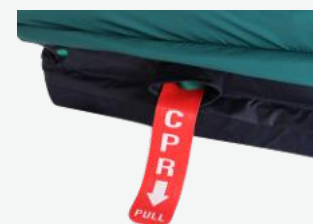

CPR-Funktion

Fakten

- Patientengewicht: 30 - 170 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 4
- bei mittlerem bis hohem Risiko
- komplettes Matratzensersatzsystem, das als Auflagesystem genutzt werden kann
- 17 Nylon-beschichtete Polyurethanzellen
- Statikfunktion zur regelbaren Weichlagerung
- akustischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- SLK Soft-Care-Tex™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- Desinfektionsmittelbeständigkeit
- atmungsaktiv und flüssigkeitsundurchlässig
- Bezug ist bis 60 °C waschbar
- CPR-Funktion zur Reanimation
- optional: SLK Frame im Standardmaß/Sondermaß (siehe S. 34)

Lieferumfang

- SLK Eco 3+4 Auflage inkl. Steuereinheit und SLK Soft-Care-Tex™ Bezug
- inkl. Schaumstoffunterlage

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.08.1012
Artikel-ID 1782 (90 x 200 cm)


Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit:
15 x 30 x 9 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm
- Höhe: 14 cm
(ohne Schaumstoffunterlage)
19 cm (mit Schaumstoffunterlage)
- max. Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 5,7 kg

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!



Nylon-Luftstromkissen

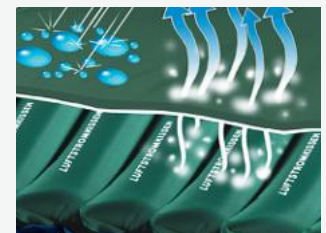

SLK Soft-Care-Tex™
Bezug

Fakten

- Patientengewicht: 40 - 130 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 2
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- großzelliges Matratzenauflagesystem
- 17-Polyurethan (PU)-beschichtete Nylonzellen mit 9 Luftstromzellen
- Statik- und Wechseldruckmodus
- optischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- SLK Soft-Care-Tex™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation
- optional: SLK Frame im Standardmaß/Sondermaß (siehe S. 34)

Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit:
16,5 x 29 x 12,5 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm
- Höhe: 14 cm
- max. Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 6 kg

Lieferumfang

- SLK I® Auflage inkl. Steuereinheit und SLK Soft-Care-Tex™ Bezug

SLK II®


Wechseldrucksystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



AUCH IN
90 X 220 CM
ERHÄLTlich



Polyurethan-
Luftstromkissen

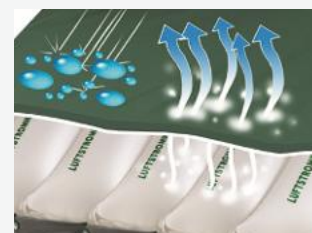

SLK Soft-Care-Tex™
Bezug

Fakten

- Patientengewicht: 40 - 135 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 3
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- großzelliges Matratzenaufлагesystem
- 17 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen
- Statik- und Wechseldruckmodus
- Micro-Chip-Steuerung (MCS) zur Überwachung des Zelldrucks
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- SLK Soft-Care-Tex™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation
- optional: SLK Frame im Standardmaß/Sondermaß (siehe S. 34)

Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit: 25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 90 x 220 cm
- Höhe: 14 cm
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 8 kg

Lieferumfang

- SLK II® Auflage inkl. Steuereinheit und SLK Soft-Care-Tex™ Bezug

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.04.1007

Artikel-ID 1701 (90 x 200 cm), 1735 (90 x 220 cm)

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

SLK III®


Wechseldrucksystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



AUCH IN
90 X 220 CM
ERHÄLTlich



Cell-in-Cell-System

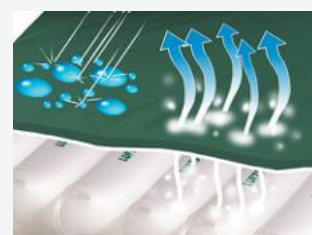

SLK Soft-Care-Tex™
Bezug

Fakten

- Patientengewicht: 40 - 195 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 3
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- hochzelliges Matratzensersatzsystem
- 20 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen
- Cell-in-Cell-System
- Statik- und Wechseldruckmodus
- Micro-Chip-Steuerung (MCS) zur Überwachung des Zelldrucks
- optischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- SLK Soft-Care-Tex™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation
- optional: SLK Frame im Standardmaß/Sondermaß (siehe S. 34)

Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit: 25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 90 x 220 cm
- Höhe: 21 cm
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 15 kg

Lieferumfang

- SLK III® Auflage inkl. Steuereinheit und SLK Soft-Care-Tex™ Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.08.1009

Artikel-ID 1702 (90 x 200 cm), 1706 (90 x 220 cm)

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

SLK IV®

Pulsationssystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



AUCH IN
90 X 220 CM
ERHÄLTlich



Cell-in-Cell-System



integrierte Kissentasche

Fakten

- Patientengewicht: 40 - 250 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 4
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- hochzelliges Matratzenersatzsystem
- 20 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen
- Cell-in-Cell-System
- Statik- und Pulsationsmodus
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- optischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- SLK Soft-Care-Text™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation
- optional: SLK Frame im Standardmaß/Sondermaß (siehe S. 34)

Lieferumfang

- SLK IV® Auflage inkl. Steuereinheit und SLK Soft-Care-Text™ Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss
- Spezialkissen zur Fersenfreilagerung und Spitzfußprophylaxe

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.08.3004

Artikel-ID 1703 (90 x 200 cm), 1751 (90 x 220 cm)

Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit: 25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 90 x 220 cm
- Höhe: 26 cm
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 18 kg


Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

SLK Pain&Therapy®

Pulsationssystem zur Dekubitus- und Schmerztherapie



Polyurethan-
Luftstromkissen

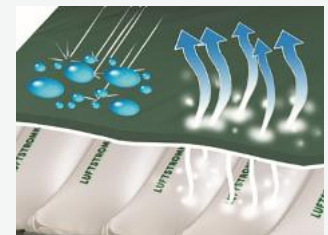

SLK Soft-Care-Tex™
Bezug

Fakten

- Patientengewicht: 30 - 135 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 4
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- großzelliges Matratzenersatzsystem, auch als Auflagesystem verwendbar
- 17 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen
- Statik- und Pulsationsmodus
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- optischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- SLK Soft-Care-Tex™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation
- optional: SLK Frame im Standardmaß/Sondermaß (siehe S. 34)

Lieferumfang

- SLK Pain&Therapy® Auflage inkl. Steuereinheit und SLK Soft-Care-Tex™ Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss
- in Folie eingeschweißte Schaumstoffauflage

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.08.3005

Artikel-ID 1704 (90 x 200 cm), 1779 (90 x 220 cm)


Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit: 25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 90 x 220 cm
- Höhe: 14 cm ohne Schaumstoff, 19 cm mit Schaumstoff
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 16 kg

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

SLK KiddyCare Digital®

Pulsationssystem speziell für Kinder zur Dekubitus- und Schmerztherapie

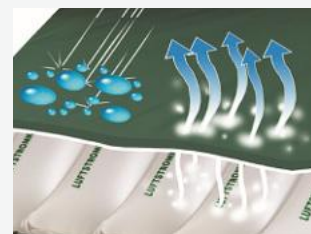

SLK Soft-Care-Tex™
Bezug



Cell-on-Cell-System

Fakten

- Patientengewicht: 3 - 75 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 4
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- großzelliges Matratzenersatzsystem für Kinder
- 36 Zellen aus reinem Polyurethan (PU)
mit 8 Luftstromzellen
- Cell-on-Cell-System
- Statik- und Pulsationsmodus
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- optischer Alarm bei niedrigem Druck
- Autofirmfunktion zur Pflege und Mobilisierung des Patienten
- automatische Tastensperre
- Druckerhöhung durch die Aufsitzfunktion möglich,
um das Einsinken des Patienten bei Oberkörperhochlagerung zu vermeiden
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- SLK Soft-Care-Tex™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation
- optional: Anpassung der Matratze an das Bettmaß durch maßgefertigte Frames möglich (siehe S. 34)

Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit:
25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 70 x 140 cm
- Höhe: 17 cm
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 10 kg

Lieferumfang

- SLK KiddyCare Digital® Auflage inkl. Steuereinheit und SLK Soft-Care-Tex™ Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss

Hilfsmittel-Nr.: 11.11.04.2096
Artikel-ID 1705 (70 x 140 cm)

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

Optima Prone

Verringerung der Workflow-Komplexität bei Beatmung in Bauchlage und Reduktion der Dekubitusrisiken

Die Bauchlagerung wird häufig zur Behandlung von ARDS-Patienten eingesetzt, erhöht jedoch das Risiko von Druckgeschwüren (Dekubitus) und kann zusätzlich zu den 5 Tagen Krankenhausaufenthalt für die Bauchlagerung ³ Tage Krankenhausaufenthalt für die Behandlung von Komplikationen im Zusammenhang mit Druckgeschwüren erfordern^{1,2}.

Die Bauchlagerung ist ein arbeitsintensives und komplexes Verfahren, bei dem alle 2 Stunden ein Team von 5 Pflegekräften für die Rücken- und Bauchlagemanöver und ein Team von 3 Pflegekräften für die Umlagerung des Kopfes des Patienten erforderlich sind, wobei die Behandlung 12 bis 16 Stunden dauert. Optima Prone ist eine spezielle druckreduzierende Lagerungslösung, die Druckschäden wirksam vorbeugt, Arbeitsabläufe optimiert, den klinischen Arbeitsaufwand reduziert und die Ergebnisse bei der Beatmung in Bauchlage verbessert.



Vereinfachte Kopflagerung

Die Kopflagerung kann von einer Person allein durchgeführt werden. Die mechanische Unterstützung der Schulter bei gleichzeitigem Freiraum für das Kinn reduziert die Arbeitsbelastung des Pflegepersonals und minimiert das Risiko einer Blockierung der Beatmungsschläuche.




Steuerung der individuellen Luftkammerhärte

Matratzenknöpfe ermöglichen es dem Pflegepersonal, den Luftdruck in den Zellen einzustellen, um eine gezielte Druckentlastung zu erreichen und Verletzungen in gefährdeten Bereichen zu vermeiden.



Schulterhebe-Modus

Um die Überstreckung der Muskulatur und die Belastung im Schulterbereich zu reduzieren, können zwei Winkel eingestellt werden.

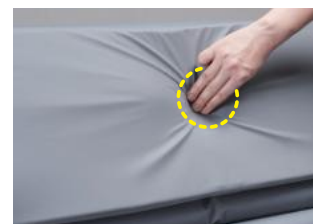

Schutz von Gesicht und Ohren des Patienten

In Bauchlage verhindert die einzigartige Kombination des patentierten Luftzellen-Designs Druckstellen oder Verletzungen in diesen empfindlichen Bereichen.


1. Shearer SC, Parsa KM, Newark A, Peesay T, Walsh AR, Fernandez S, Gao WZ, Pierce ML. Gesichtsdrukverletzungen bei Bauchlage in der COVID-19-Ära. Laryngoscope. 2021 Jul;131(7):E2139-E2142. doi: 10.1002/lary.29374. Epub 2021 Jan 5. PMID: 33389768.

2. Douglas IS, Rosenthal CA, Swanson DD, Hiller T, Oakes J, Bach J, Whelchel C, Pickering J, George T, Kearns M, Hanley M, Mould K, Roark S, Mansoori J, Mehta A, Schmidt EP, Neumeier A. Safety and Outcomes of Prolonged Usual Care Prone Position Mechanical Ventilation to Treat Acute Coronavirus Disease 2019 Hypoxemic Respiratory Failure. Crit Care Med. 2021 Mar 1;49(3):490-502. doi: 10.1097/CCM.00000000000004818. PMID: 33405409.

3. da Silva FCT, Neto MLR. Psychologische Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Gesundheit

Optima Prone


Lösung für Druckverletzungen in der Bauchlage

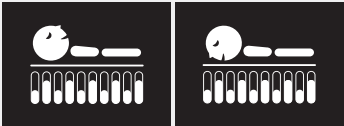

Zwei Lagerungsarten
Anwendung des am besten geeigneten Drucks in verschiedenen Positionen (Rücken-/Bauchlage).



CPR-Funktion
Schnelles Ablassen der Luft aus der Matratze für Notfälle.

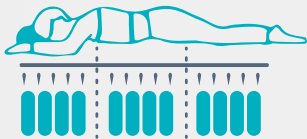

Multi-Zone Air Pressure
Anpassbare Druckverteilung über die gesamte Liegefläche, die sich den Konturen des Patienten anpasst.

Richtige Organisation der Schläuche
Der einstellbare Luftstrom in den einzelnen Luftkammern ermöglicht dem Pflegepersonal eine gute Schlauchführung.



4-Way-Stretch Bezug
Atmungsaktiver und flüssigkeitsabweisender Bezug zur Reduzierung von Reibung und Scherkräften.



Wasserbeständig



Flammbeständig



Biokompatibilität



Dampfdurchlässig



Verringert das Infektionsrisiko
Die obere Abdeckung besteht aus geschweißten Nähten (Hochfrequenz-Induktionshärtung®), um das Eindringen von Flüssigkeiten zu verhindern.

Technische Daten/Maße		Optima Prone			
Pumpe/Steuereinheit 	Maße	34,1 x 16,5 x 26 cm (13,4 x 6,5 x 10,2 Zoll)			
	Gewicht	5 kg (11 lb) mit Batterie			
	Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz			
	Therapie-Modus	Maximal fester Druck / Abwechselnd / Kontinuierlicher Niederdruck Sitzbefüllung (automatisch) / Positionsmodus			
	Lärmpegel	< 37 dB			
Matratze 	Maße	Zellen	Länge	Breite	Höhe
		21	200 cm (78,7 in)	85 cm (33,5 in)	20 cm (8 in)
	Typ	8" / Ersatz			
	Gewicht	14 kg (30,8 lb)			
	Matratzenbezug	4-Way-Stretch-Polyurethan Bezug mit verschweißten Nähten			
	Material der Zellen	TPU			
	Maximales Patientengewicht	250 kg (550 lb)			

Pumpe: wasserfest (IP21); Matratze: flammhemmende Normen (EN597-1, EN597-2), RoHS, WEEE

Optima Turn

Verringerung der Komplexität der Patientenversorgung/-lagerung und Reduktion der Dekubitusrisiken

8.5% der erwachsenen Akut- und Postakutpatienten entwickeln einen im Krankenhaus erworbenen Dekubitus, mit einer täglichen Inzidenz von 5,4 Fällen pro 10.000 Patienten. In mehr als der Hälfte aller Fälle handelt es sich um einen Dekubitus ersten oder zweiten Grades, wobei hauptsächlich das Kreuzbein, die Fersen und die Hüfte (in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit) betroffen sind. Ein Dekubitus führt zu einer signifikanten Erhöhung der Mortalität stationärer Patienten und zu einer Verlängerung des Krankenhausaufenthalts um 7 bis 11,2 Tage.¹⁻³

Die 4-stündliche Umlagerung von Patienten in eine schräge Seitenlage, die sogenannte 30-Grad-Lagerung, auf einer Wechseldruckmatratze führt zu einer Reduktion der Dekubitusfälle um 85%, einer Verringerung der Arbeitsintensität der Pflegekräfte sowie einer Verbesserung des Patientenkomforts – und der Kosteneffizienz.^{4,5}

Optima Turn ist ein Matratzensystem mit druckentlastender, stützender Liegefläche zur Erhöhung der Effizienz bei der Patientenversorgung/-lagerung und zur Verbesserung der Dekubitusprophylaxe, der Patientenversorgung sowie der Behandlungsergebnisse bei stationären Patienten.



Zugriff auf mehrere Therapiemodi

Pflegekräfte können zwischen den Therapiemodi Statisch, Wechseldruck und Umlagerung wählen, um eine dem Genesungsstatus des Patienten entsprechende hochwertige und flexible Patientenversorgung zu gewährleisten, ohne den Patienten von Matratze zu Matratze zu transferieren.

Konstante Umlagerungsgeschwindigkeit und Lagerungswinkel

Eine langsame und gleichmäßige Umlagerung sorgt dafür, dass der Patient die Umlagerung als sanft und angenehm empfindet. Die Pflegekräfte können zwischen verschiedenen Lagerungsarten/-winkeln wählen (10-, 20- und 30-Grad-Lagerung), um die Behandlungsergebnisse und damit den Genesungsprozess der Patienten zu optimieren.

Automatische 30-Grad-Lagerung

Die Umlagerung in die 30-Grad-Lage erfolgt durch Belüftung zweier längsgerichteter Zellen (Luftkammern), womit ein übermäßiger Kraftaufwand der Pflegekräfte vermieden und die Verletzungsgefahr reduziert wird. Die automatische Umlagerung unterstützt die kontinuierliche, alternierende 30-Grad-Lagerung (links/rechts) und erhöht damit die Compliance hinsichtlich der klinischen Leitlinien zur Umlagerung von immobilen Patienten.


Optimale Patientensicherheit bei der Umlagerung

Solide Seitenpolster mit aufblasbaren Zellen (Luftkammern), in Kombination mit den Bettseitenteilen („Bettgitter“) verhindern, dass der Patient bei der Umlagerung von der Matratze rutscht oder sich gefangen oder unbehaglich fühlt, oder dass das „Bettgitter“ bei der Umlagerung Schmerzen verursacht. Optima Turn unterstützt nur die Umlagerung des Oberkörpers, was die Patientensicherheit verbessert.

Klinische Vorteile

Der Vorteil der regelmäßigen, alternierenden Umlagerung von stationären Patienten in die 30-Grad-Seitenlage links/rechts führt im Vergleich zur konventionellen 90-Grad-Seitenlage zu einer Reduktion der Dekubitusinzidenz.⁶

Die Ferse (Calcaneus) ist aufgrund der starken Druckbelastung auf kleiner Fläche, mit nur wenig schützendem Gewebe zwischen Haut und Knochen, anfällig für Dekubitus.^{7,8} Das Anheben bzw. Freilegen der Fersen, um sie vom Druck zu entlasten, führt bei stationären Patienten zu einer signifikanten Reduktion des Dekubitusrisikos.⁹

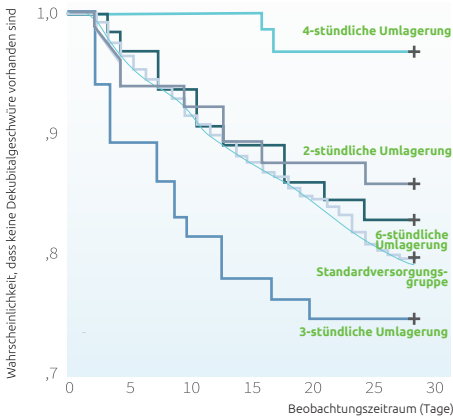

Verglichen mit der Standardversorgung reduziert eine 4-stündliche Umlagerung Dekubitalgeschwüre bei Risikopatienten um 85 %.⁵

1. Li, Z., Lin, F., Thalib, L., Chaboyer, W. (2020). Global prevalence and incidence of pressure injuries in hospitalised adult patients: A systematic review and meta-analysis. *Int. J. Nurs. Stud.*, 105: 103546. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103546>. Epub: 31.01.2020. PMID: 32113142.

2. Bauer, K., Rock, K., Nazzari, M., Jones, O., Qu, W. (2016). Pressure Ulcers in the United States' Inpatient Population From 2008 to 2012: Results of a Retrospective Nationwide Study. *Ostomy Wound Management*, 62(11): 30–38. PMID: 27861135.

3. Sullivan, N., Schoelles, K. M. (2013). Preventing In-Facility Pressure Ulcers as a Patient Safety Strategy: A Systematic Review. *Ann. Intern. Med.*, 158: 410–416. <https://doi.org/10.7326/0003-4819-158-5-201303051-00008>. PMID: 23460098.

4. Defloor, T. (2000). The effect of position and mattress on interface pressure. *Appl. Nurs. Res.*, 13(1): 2–11. [https://doi.org/10.1016/S0897-1897\(00\)80013-0](https://doi.org/10.1016/S0897-1897(00)80013-0). PMID: 10701278.

5. Defloor, T., De Bacquer, D., Grypdonck, M. H. (2005). The effect of various combinations of turning and pressure reducing devices on the incidence of pressure ulcers. *Int. J. Nurs. Stud.*, 42(1): 37–46. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2004.05.013>. PMID: 15582638.

6. Moore, Z., Cowman, S., Conroy, R. M. (2011). A randomised controlled clinical trial of repositioning, using the 30° tilt, for the prevention of pressure ulcers. *J. Clin. Nurs.*, 20(17–18): 2633–2644. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2011.03736.x>. Epub: 27.06.2011. PMID: 21702861.

7. Van Zwam, W. G. H., van Turnhout, M. C., Oomens, C. W. J. (2020). Risk factors for developing heel ulcers for bedridden patients: A finite element study. *Clin. Biomech.*, 78: 105094. <https://doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2020.105094>. Epub: 17.06.2020. PMID: 32619872.

Spezifikationen		Optima Turn	
Pumpe		Abmessungen	34,1 x 16,5 x 26,0 cm
		Gewicht	4,5 kg
		Gehäusematerial	ABS, flammhemmend
		Netzspannung	220 - 240 V/50 Hz / 110 - 120 V/60 Hz
		Wechselzyklus	10/15/20/25 min.
Matratze		Matratzentyp	13 cm / 5 cm (Ersatzsystem)
		Abmessungen	200 x 85/90 x 13 cm, mit 25 cm Seitenpolster
		Zellenhöhe	21 x 13 cm / 5 cm (einzelne Zellen)
		Gewicht	11, 4 kg
		Bezugsmaterial	4-Way-Stretch-PU, Polyesterbezug mit Schweißnähten
		Zellenmaterial	TPU
		Maximales Patientengewicht	180 kg

Pumpe: Tropfwasserschutz (nach IP21); Matratze: auf Entzündbarkeit geprüft (EN 597-1, EN 597-2), RoHS-/WEEE-konform

Optima Auto

Be well, Live well
Wellell

Geeignet für eine intensive Dekubitusversorgung

Im Durchschnitt entwickeln 65 von 1000 erwachsenen stationär behandelten Patienten Druckverletzungen (auch bekannt als Dekubitus) und benötigen 18 Tage im Krankenhaus. Das ist

2,5 Mal so viel wie bei einem durchschnittlichen Akutpatienten. Finanziell bedeutet die Behandlung von Dekubitus für die Familien einen Rückschlag von 15.700 bis 17.700 USD. Da es sich bei 87 % der Patienten um ältere Menschen handelt, beschleunigen eine alternde Bevölkerung und COVID-19 das Auftreten von Dekubitus und erschöpfen die weltweiten Human-, Material- und Kapitalreserven.

Optima Auto bietet dem Pflegepersonal mehr Kontrolle und Personalisierung hinsichtlich der Festigkeit der Luftmatratze, eine einfache Luftpumpenschnittstelle, die für alle Ebenen des Pflegepersonals geeignet ist, und ein Reservestromsystem zur Aufrechterhaltung der Druckverteilung bis zu 6 Stunden. Die Vorbeugung von Druckverletzungen verbessert die Ergebnisse und die Pflegeerfahrung der Patienten.



Vorbeugung von Verletzungen bei Patienten und Pflegepersonal

Die automatische Erkennung und Initiierung der Pumpe vereinfacht die Arbeitsabläufe des Pflegepersonals, um schnell eine optimale Druckentlastung zu gewährleisten.

Kontinuierliche Druckentlastung während des Transports gewährleistet ununterbrochene Therapieergebnisse und Patientenkomfort.




Die gestützte und bequeme Sitzposition motiviert die Patienten, aktiv zu bleiben, und verbessert so die Genesung und das Ergebnis.

Die intuitive Pumpenschnittstelle und der niedrige Geräuschpegel ermöglichen es den Pflegekräften, den ganzen Tag über eine gleichbleibende Pflege und Komfort zu gewährleisten.

Klinische Anwendung


Multi-Zonen-Luftdruck

Das System weist eine signifikante Druckumverteilung auf, um sich verschiedenen Patientenkonturen mit Blick auf Stabilität und Komfort anzupassen, indem es unterschiedliche Luftdruckniveaus in statischen Kopfkissen-, Rumpf- und Unterschenkelabschnitten bietet.

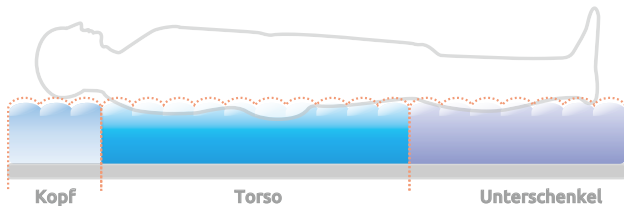

6 Zelle-in-Zelle Luftzellen

Bietet hervorragende Unterstützung im Sakralbereich für den Patienten in sitzender Position oder im Sitzen auf der Seite vor dem Verlassen des Bettes.

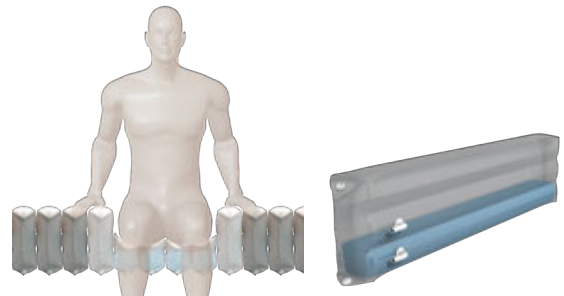

Geringer Mikro-Luftverlust

Sorgt für eine gute Belüftung und hilft, die Ansammlung von Wärme und Feuchtigkeit zu reduzieren

Außerdem bietet die Optima Auto Pumpe die folgenden Vorteile:

Das Bild zeigt die Optima Auto Pumpe mit einem Touchscreen-Display, das verschiedene Symbole für die Steuerung der Pumpe anzeigt. Die Pumpe ist in einem dunklen Gehäuse eingebaut.

- Ein-Tasten-Setup
- Gebaut für klinische Umgebungen
- Intuitive Auto-Sensor Technologie
- Auto-Erkennung und Auto-Anpassung

Spezifikationen

Modell	Optima Auto	
Pumpe	Maße	13.4" x 6.5" x 10.2" / 34.1 x 16.5 x 26.0 cm
	Gewicht	4.5 kg / 9.9 lb, 5 kg / 11.0 lb (Mit Batterie)
	Gehäusematerial	Flammhemmendes ABS
	Versorgungsspannung	220-240V / 50 Hz; 110-120V / 60 Hz
	Betriebszyklus	10, 15, 20, 25 min.
Matratze	Maße	78.7" x 36" / 34" / 32" x 8" / 200 x 80/85/90 x 20 cm
	Höhe der Zelle	8" x 21 Zellen
	Gewicht	9.2 kg / 20.2 lb
	Überzugmaterial:	4-Way-Stretch PU / Polyester-Bezug (Optional: Nylon / PU gesteppter Bezug)
	Zellenmaterial	TPU
	CPR-Knopf	1 Stück
	Maximales Patientengewicht	250 kg / 550 lb
	Flammhemmende Standards	EN 597-1 & EN 597-2

Sedens 500

Netzunabhängiges Wechseldrucksitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



Schaumstoff/Luftzellen



Bi-Stretch-Bezug

Fakten

- max. Patientengewicht: 120 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 4
- akkubetriebenes Wechseldruck-Sitzkissen mit viskoelastischer Randzonenverstärkung
- wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie, die bei voller Belastung eine Betriebsdauer von 12 Stunden ermöglicht
- wählbare Wechseldruckintervalle
- Statik- und Wechseldruckmodus zur Weichlagerung
- visueller und akustischer Alarm für mehr Sicherheit
- die Steuereinheit kann mit Hilfe der mitgelieferten Tasche sicher am Rollstuhl oder Stuhl fixiert werden
- für überwiegend sitzende Patienten
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach EN 597-1 & EN 597-2

Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit: 12,5 x 25 x 5,7 cm (H x B x T)
- Maße Sitzkissen: 10 x 43 x 43 cm (H x B x T)
- Akku: 6 V Ni-MH / 2000 mAh
- Gesamtgewicht: 2,0 kg

Lieferumfang




- Sedens 500 Rollstuhlsitzkissen inkl. Nylon-Polyurethan-beschichtetem Bi-Stretch-Bezug
- 1 programmierbare Steuereinheit, inkl. Akku
- Transporttasche für die Steuereinheit
- ein Ladegerät

#workgreen

Artikel-ID 2231 (43 x 43 cm)

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

Systeme zur bariatrischen Versorgung
XXL Schwerlast-Lagerungssysteme

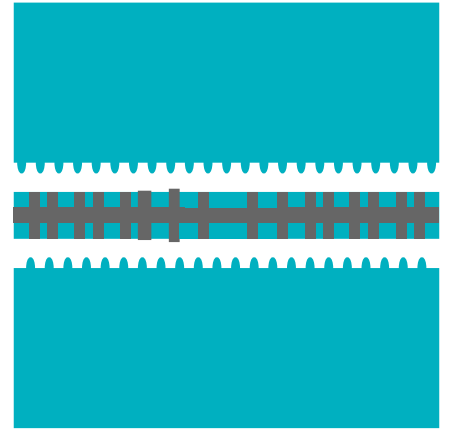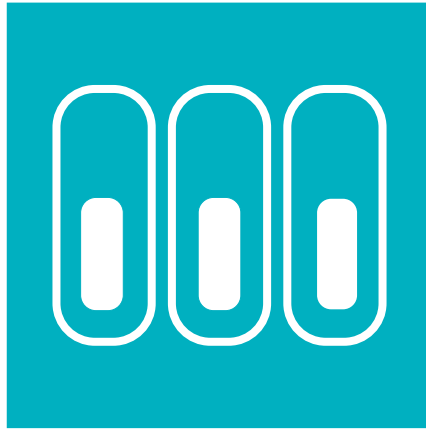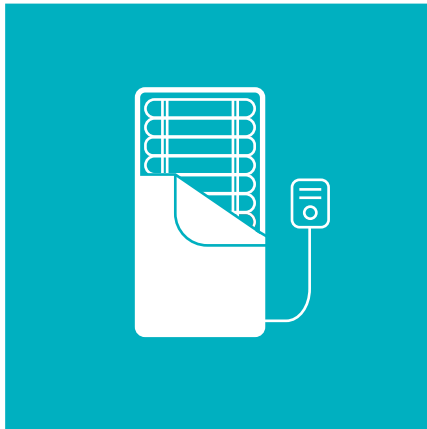

Übersicht

luftbefüllte energetische Therapiesysteme

	SLK ECO 1+2	SLK I	SLK II	SLK III	SLK IV	SLK Pain&Therapy	SLK KiddyCare Digital	SLK IV XXL
Stadium bis (nach EPUAP)	2	2	3	3	4	4	4	4
bis Risikostufe	niedrig / mittel	niedrig / mittel	mittel / erhöht	mittel / erhöht	hoch	hoch	hoch	hoch
für Patienten von	30-140 kg	40-130 kg	40-135 kg	40-195 kg	40-250 kg	30-135 kg	3-75 kg	80-400 kg
Statikfunktion	+	+	+	+	+	+	+	+
Pulsation	-	-	-	-	+	+	+	+
Cell-in-Cell-System	-	-	-	+	+	-	-	+ ^{*1}
Spitzfußprophylaxe	-	-	-	-	+	-	-	+
SLK Soft-Care-Tex™ Bezug	-	+	+	+	+	+	+	+ ^{*2}
Transporttasche	-	-	-	+	+	+	+	+
Matratzenauflagesystem	+	+	+	-	-	-/+ ^{*3}	-	-
Matratzenersatzsystem	-	-	-	+	+	-/+ ^{*3}	+	+
CPR-Funktion	+	+	+	+	+	+	+	+
Sensor-Chip-Steuerung (SCS)	-	-	-	-	+	+	+	+
Micro-Chip-Steuerung (MCS)	-	-	+	+	-	-	-	-
VDE-Messpunkt	-	+	+	+	+	+	+	+
EPR-Netzkabel	-	+	+	+	+	+	+	+
Hilfsmittelnummer	11.29.04.1018	11.29.04.1005	11.29.04.1007	11.29.08.1009	11.29.08.3004	11.29.08.3005	11.11.04.2096	

* 1 SLK IV XXL 90er Breite: Cell-in-Cell System / 120er Breite: Cell-on-Cell System

* 2 SLK IV XXL 90er Breite: SLK Soft-Care-Tex™ Bezug / 120er Breite: SLK Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug

* 3 Die SLK Pain&Therapy wird standardmäßig als Matratzenersatzsystem ausgeliefert,
kann jedoch durch Entnahme des Schaumstoffkerns auch als Auflagesystem verwendet werden.

SLK IV XXL


Pulsationssystem speziell zur bariatrischen Versorgung zur Dekubitus- und Schmerztherapie



**BREITE
90 CM**



Cell-in-Cell-System

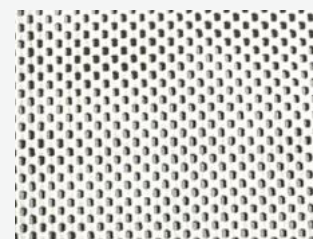

Anti-Rutsch-Pad

Fakten

- Patientengewicht: 80 - 400 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 4
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- Matratzensersatzsystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie
- 20 Zellen, davon 9 Luftstromzellen
- Cell-in-Cell-System
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- Statik- und Pulsationsmodus
- SLK Soft-Care-TextTM Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- verstärkte Luftanschlüsse an den Luftzellen
- CPR-Ventil zur Matratzenschnellentlüftung
- Anti-Rutsch-Pads
- optional: SLK Frame im Sondermaß (siehe S. 34)

Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit: 25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm
- Höhe: 26 cm
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 18 kg

Lieferumfang

- SLK IV XXL System inkl. Steuereinheit und SLK Soft-Care-TextTM Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss

Artikel-ID 1882 (90 x 200 cm)

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

SLK IV XXL


Pulsationssystem speziell zur bariatrischen Versorgung zur Dekubitus- und Schmerztherapie



**BREITE
120 CM**



9 Luftstromzellen

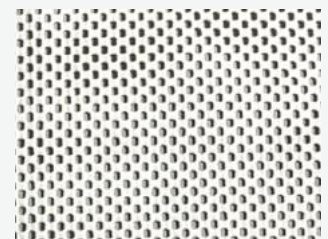

Anti-Rutsch-Pad

Fakten

- Patientengewicht: 80 - 400 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 4
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- Matratzensersatzsystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie
- 20 Zellen, davon 9 Luftstromzellen
- Statik- und Wechseldruckmodus
- Cell-on-Cell System
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- Statik- und Pulsationsmodus
- abwaschbarer SLK Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig
- CPR-Ventil zur Matratzenschnellentlüftung
- Anti-Rutsch-Pads
- optional: SLK Frame im Sondermaß (siehe S. 34)

Technische Daten / Maße

- Maße Steuereinheit: 25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 120 x 200 cm
- Höhe: 26 cm
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 18 kg

Lieferumfang

- SLK IV XXL System inkl. Steuereinheit und Polyurethan-beschichtetem SLK Bi-Stretch-Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss

Artikel-ID 2080 (120 x 200 cm)

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

SLK XXL Foam


hochwertiges HR-Schaumstoffsystem für adipöse Patienten



AUCH IN
SONDERGRÖSSEN
ERHÄLTlich



hervorragendes
Mikroklima

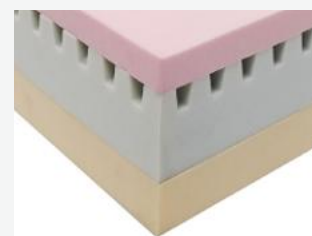

optimale
Druckentlastung durch
Profilschnitte

Fakten

- max. Patientengewicht: 300 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 3
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- 3-schichtige Schaumstoffmatratze für die Versorgung von bariatrischen Patienten mit speziellen Druckverteilungs- und Belüftungskanälen
- Reduzierung des Auflagedruckes an allen gefährdeten Körperzonen
- optimale Druckverteilung und einzigartiges Einsinkverhalten durch spezielle Kanalstrukturen
- hervorragendes Mikroklima
- maximaler Komfort in jeder Liegeposition durch Visco-Topschaum
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5 / OEKO-TEX Standard 100
- Schaumstoff FCKW-frei

Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm, 120 x 200 cm
weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 22 cm
- SLK Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig, waschbar bis 60° C
- Schaumstoff:
3-Schichten-Schaumstoff
- Raumgewicht: 50 kg / m³

Lieferumfang


- SLK XXL Foam Schwerlastmatratze inkl. Polyurethan-beschichtetem SLK Bi-Stretch-Bezug mit flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss

Artikel-ID 10063 (90 x 200 cm), 10064 (100 x 200 cm), 10081 (120 x 200 cm), 10087 (Sondermaß)

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

SLK Frame

Schaumstoffrahmen

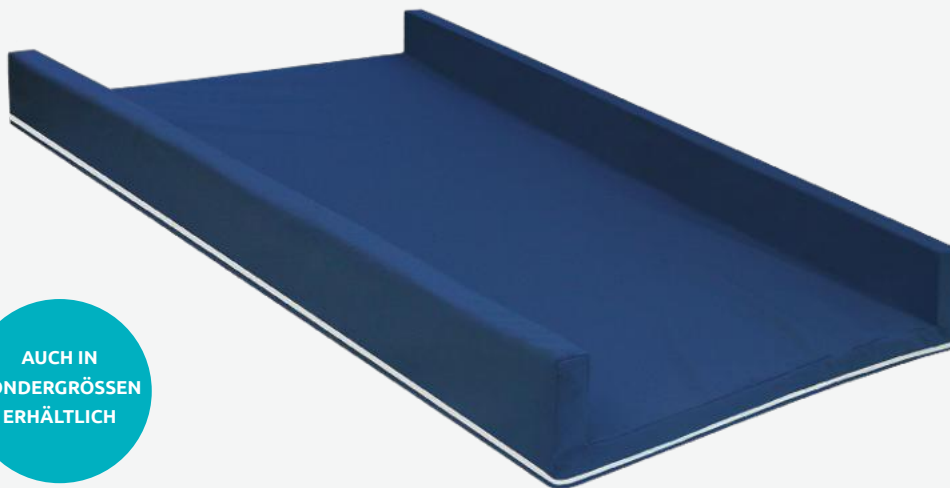

AUCH IN
SONDERGRÖSSEN
ERHÄLTlich



Einsatz einer SLK IV XXL
mit einem SLK Frame

Fakten

- speziell für den Einsatz in der Schwerlastversorgung
- Schaumstoffrahmen für großzellige Wechsellagersysteme
- Rahmenbasis 5 cm mit Seiten-, Kopf- und Fußteilen aus Schaumstoff
- schnelle Anpassung an vorhandene Bettsysteme in allen Größen
- ersetzt aufwändige Sonderanfertigungen
- abwaschbarer SLK Bi-Stretch-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5 Verfahren
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- Bezug erfüllt OEKO-TEX-Standard 100, FCKW-frei
- optional: für alle SLK Anti-Dekubitussysteme

Technische Daten / Maße

- Standard-Innenmaß:
15 x 90 x 200 cm (H x B x L)
- Standard-Außenmaß:
20 x 100 x 200 cm (H x B x L)
- Sondermaße für die meisten
Bettsysteme
- abnehmbarer Bezug mit
Reißverschluss, waschbar bis 60° C

Lieferumfang


- SLK Frame Schaumstoffrahmen inkl. Polyurethan-beschichtetem SLK Bi-Stretch-Bezug mit flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss

Artikel-ID 10026 (100 x 200 cm), 10033 (Sondermaß)

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

SLK GreenCare

non-energetisches Hybridsystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie

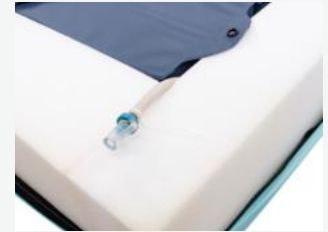

Randzonenverstärkung



einzelne entnehmbare Polyurethan-Zellen

Ohne Randzonenverstärkung würde die Matratze bei Belastung unkontrolliert in ihrer Form nachgeben.



Randzonenverstärkung

Mit Randzonenverstärkung bleibt sie stabil und gibt dem Patienten beim Aufstehen die Sicherheit und verhindert während des Liegens ein unplanmäßiges Abrutschen zur Seite.

Fakten

- Patientengewicht: 20 - 195 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 4
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- Dekubitusprophylaxe und-therapie unter Berücksichtigung sonstiger Einflüsse
- automatische Druckventil-Regulierung (AVR)
- spürbare Reduktion des Auflagedruckes
- passt sich flexibel den Bewegungen des Patienten an
- Reduzierung von Reibung und Scherkräften durch SLK Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug
- Randzonenverstärkung unterstützt die Pflegekraft beim Mobilisieren des Patienten auf der Bettkante
- atmungsaktiver und flüssigkeitsabweisender Bezug
- einfach zu reinigen / desinfizieren (keine elektrischen Teile)
- einzeln entnehmbare Polyurethan-Zellen mit integriertem Zellkern aus Polyurethan-Schaum
- keine Energiekosten

Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 cm
- Höhe: 18 cm
- SLK Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig, waschbar bis 60° C und chemothermisch aufbereitbar
- Gesamtgewicht: 14 kg

Lieferumfang

- SLK GreenCare Anti-Dekubitus-Matratze inkl. SLK Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.13.0002
Artikel-ID 2016 (90 x 200 cm)

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

SLK BlueCare

energetisches Hybridsystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



10 Zellen mit integriertem Schaumstoff-Zellkern



CPR-Funktion

Fakten

- Patientengewicht: 20 - 180 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 4
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- Dekubitusprophylaxe und -therapie unter Berücksichtigung sonstiger Einflüsse
- aktive Druckentlastung durch 3 zu 1 Wechsellast
- für den Einsatz in der Schmerztherapie geeignet
- Reduzierung von Reibung und Scherkräften durch SLK Bi-Stretch-Bezug
- Randzonenverstärkung unterstützt die Pflegekraft beim Mobilisieren des Patienten auf der Bettkante
- atmungsaktiver und flüssigkeitsabweisender Bezug
- 10 einzeln herausnehmbare Polyurethan-Zellen mit integriertem Zellkern aus Polyurethan-Schaumstoff
- einfach zu reinigen / desinfizieren

Technische Daten / Maße


- Maße Steuereinheit: 16,5 x 29 x 12,5 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm
- Höhe: 12 cm unbelüftet, ohne Kompression, 18 cm belüftet ohne Kompression
- SLK Nylon-Polyurethan-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig, waschbar bis 60° C und chemothermisch aufbereitbar
- Gesamtgewicht: 11 kg

Lieferumfang

- SLK BlueCare Anti-Dekubitus-System inkl. Steuereinheit und Nylon-Polyurethan-beschichtetem SLK Bi-Stretch-Bezug

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.09.2002
Artikel-ID 2012 (90 x 200 cm)

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

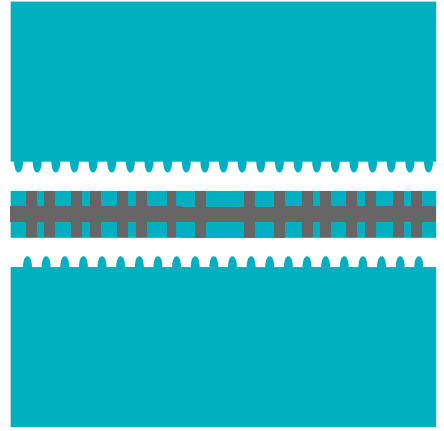

medizinische Schaumstoffsysteme
für die **Dekubitusprophylaxe und -therapie**

PROPHYLAXE

SLK NeoCare Basic


Standard Pflegebettmatratze

SLK NeoCare I

Prophylaxe- und Therapiematratze



SLK NeoCare Basic
Schaumschicht durch
Belüftungskanäle

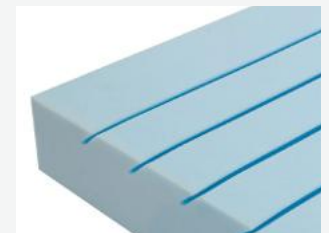

SLK NeoCare I
3 cm Einschnitte reduzieren
Scher- und Reibungskräfte

Fakten SLK NeoCare Basic

- max. Patientengewicht: 120 kg
- Pflegebettmatratze
- Hoher Liegekomfort durch hochwertigen PU-Schaumstoff

Fakten SLK NeoCare I

- max. Patientengewicht: 120 kg
- ISO 10993-1 Prüfung der Biokompatibilität: bestanden!
- DIN EN 597 Teil 1 und 2: Prüfung der flammhemmenden Wirkung: bestanden!
- Schaumstoffqualität: offenporiger Kaltschaum
- 8 Einschnitte in Längsrichtung
- 7 Jahre Garantie auf Produktionsfehler und Rückstellvermögen / Kuhlenbildung

Lieferumfang SLK NeoCare Basic

- SLK NeoCare Basic Pflegebettmatratze
inkl. SLK Trikotmatratzenbezug

Lieferumfang SLK NeoCare I

- SLK NeoCare I Therapiesystem
inkl. SLK Trikotmatratzenbezug

Technische Daten / Maße SLK NeoCare Basic

- für Bettmaß: 90 x 200 cm,
100 x 200 cm
weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 12 cm
- Bezug: waschbar bis 60° C
- Raumgewicht: 35 kg / m³

Technische Daten / Maße SLK NeoCare I

- für Bettmaß: 90 x 200 cm,
100 x 200 cm
weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 12 cm
- Bezug: waschbar bis 60° C
- Raumgewicht: 40 kg / m³

SLK NeoCare Basic Artikel-ID 10061 (90 x 200 cm), 10066 (100 x 200 cm)

SLK NeoCare I Artikel-ID 10067 (90 x 200 cm), 10068 (100 x 200 cm)

SLK NeoCare II

Prophylaxe- und Therapiematratze



Scherkraftreduzierende
Einschnitte



Kaltschaum-Deckschicht

Fakten

- max. Patientengewicht: 120 kg
- Dekubitusstadium: 1
- bei geringem Risiko
- ISO 10993-1 Prüfung der Biokompatibilität: bestanden!
- DIN EN 597 Teil 1 und 2: Prüfung der flammhemmenden Wirkung: bestanden!
- Schaumstoffqualität Deckschaum: offenporiger Kaltschaum
- 8 Einschnitte in Längsrichtung
- 7 Jahre Garantie auf Produktionsfehler und Rückstellvermögen / Kuhlenbildung

Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 cm,
100 x 200 cm
weitere Maße siehe Preisliste
- Oberschicht: 2,5 kPa Stauchhärte
- Unterschicht: 4,5 kPa Stauchhärte
- Höhe: 12 cm
- Bezug: waschbar bis 60° C
- Raumgewicht: 40 kg / m³

Lieferumfang

- SLK NeoCare II Pflegebettmatratze
inkl. SLK Trikotmatratzenbezug

#workgreen

Artikel-ID 10076 (90 x 200 cm), 10077 (100 x 200 cm)

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

SLK FoamCare Comfort®

profilierte HR-Schaummatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



AUCH IN
SONDERGRÖSSEN
ERHÄLTlich



unterschiedliche
Härtezonen



druckentlastende
Würfelstruktur

SLK FoamCare Comfort® 120

- max. Patientengewicht: 130 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 2
- bei niedrigem bis mittlerem Risiko

SLK FoamCare Comfort® 140

- max. Patientengewicht: 160 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 2
- bei niedrigem bis mittlerem Risiko

Fakten

- 5-Zonen HR-Schaumkern mit Konturschnitten (Kopf-, Schulter-, Hüft-, Bein- und Fußbereich)
- Reduzierung des Auflagedruckes an allen gefährdeten Körperzonen
- optimale Druckentlastung durch unterschiedliche Härtezonen
- maximaler Komfort in jeder Liegeposition
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5 / OEKO-TEX Standard 100
- Schaumstoff FCKW-frei

Lieferumfang

- SLK FoamCare Comfort® 120 / 140 Anti-Dekubitus-Matratze inkl. Polyurethan-beschichtetem SLK Bi-Stretch-Bezug mit flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.05.1032

SLK FoamCare Comfort® 120 Artikel-ID 10014 (90 x 200 cm), 10015 (100 x 200 cm)


SLK FoamCare Comfort® 140 Artikel-ID 10058 (90 x 200 cm), 10065 (100 x 200 cm)

Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm
weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 12 / 14 cm
weitere auf Anfrage
- SLK Bi-Stretch-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig, waschbar bis 60° C
- Schaumstoff:
5-Zonen Schaumstoff


SLK ProfiSoft Comfort®

3-schichtige Komfortmatratze mit Belüftungskanälen zur Dekubitusprophylaxe und -therapie

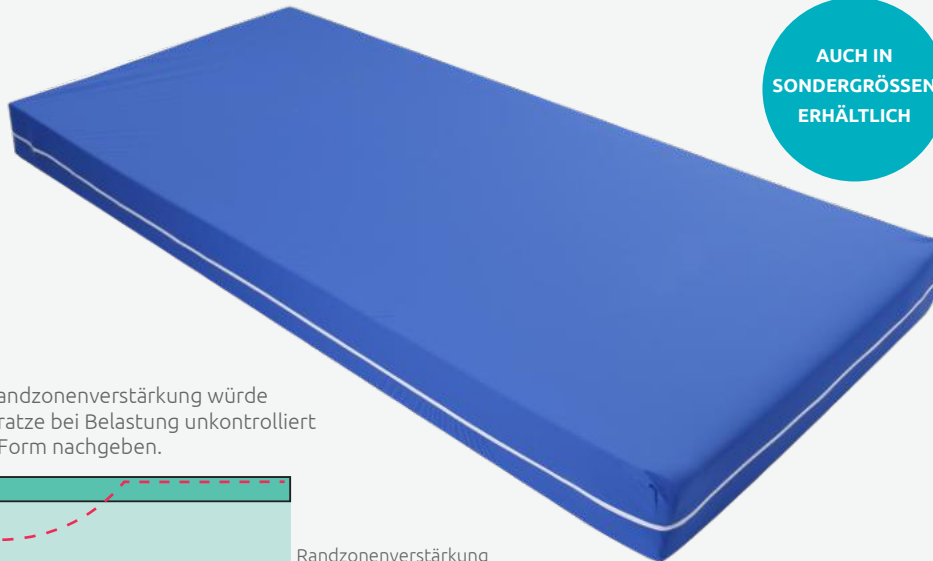


AUCH IN
SONDERGRÖSSEN
ERHÄLTlich

Ohne Randzonenverstärkung würde die Matratze bei Belastung unkontrolliert in ihrer Form nachgeben.

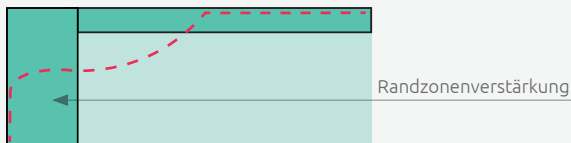

Mit Randzonenverstärkung bleibt sie stabil und gibt dem Patienten beim Aufstehen die Sicherheit und verhindert während des Liegens ein unplanmäßiges Abrutschen zur Seite.

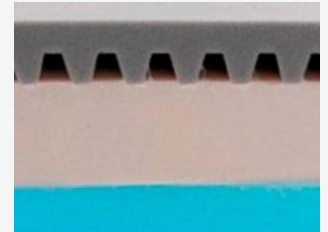

hervorragendes
Mikroklima durch
Belüftungskanäle



+ 220 cm Bezug

optionales
Verlängerungsset
(90 x 20 cm)

Fakten

- max. Patientengewicht: 180 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 3
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- 3-schichtige Komfortmatratze mit speziellen Druckverteilungs- und Belüftungskanälen
- Reduzierung des Auflagedruckes an allen gefährdeten Körperzonen
- optimale Druckverteilung und einzigartiges Einsinkverhalten durch spezielle Kanalstrukturen
- Randzonenverstärkung
- hervorragendes Mikroklima
- maximaler Komfort in jeder Liegeposition
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5 / OEKO-TEX Standard 100
- Schaumstoff FCKW-frei
- Zusätzlich: pfiffiges und ökonomisches Set für die Verlängerung unserer meistverkauften Antidekubitus-Schaumstoffmatratze
Verlängerungsset: 90 x 20 cm (20 cm langes Set bestehend aus 20 cm Schaumstoff + 220 cm Matratzenbezug)

Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm
weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 15 cm
weitere auf Anfrage
- SLK Bi-Stretch-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig, waschbar bis 60° C
- Schaumstoff:
3-Schichten-Schaumstoff

Lieferumfang

- SLK ProfiSoft Comfort® 150 Anti-Dekubitus-Matratze inkl. Polyurethan-beschichtetem SLK Bi-Stretch-Bezug mit flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.05.1034

Artikel-ID 10016 (90 x 200 cm), 10017 (100 x 200 cm)

Verlängerungsset Artikel-ID 10078 (90 x 20 cm)

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

SLK ViscoCare Comfort®

viskoelastisches Schaumstoffsystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



AUCH IN
SONDERGRÖSSEN
ERHÄLTlich

Ohne Randzonenverstärkung würde die Matratze bei Belastung unkontrolliert in ihrer Form nachgeben.



Mit Randzonenverstärkung bleibt sie stabil und gibt dem Patienten beim Aufstehen die Sicherheit und verhindert während des Liegens ein unplanmäßiges Abrutschen zur Seite.



Randzonenverstärkung



Noppenstruktur wirkt Wärmestau entgegen

Fakten

- max. Patientengewicht: 200 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 3
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- profilierter, viskoelastischer Schaumstoff in 3-Zonen-Einteilung
- Einsinkverhalten mit Memo-Effekt
- Reduzierung des Auflagedruckes an allen gefährdeten Körperzonen
- optimale Druckentlastung durch unterschiedliche Härtezonen
- Randzonenverstärkung
- maximaler Komfort in jeder Liegeposition
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5 / OEKO-TEX Standard 100
- Schaumstoff FCKW-frei

Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm
weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 15 cm
weitere auf Anfrage
- SLK Bi-Stretch-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig, waschbar bis 60° C
- Schaumstoff: Noppenschaumstoff

Lieferumfang

- SLK ViscoCare Comfort® 150 Anti-Dekubitus-Matratze inkl. Polyurethan-beschichtetem SLK Bi-Stretch-Bezug mit flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.05.1033

Artikel-ID 10020 (90 x 200 cm), 10021 (100 x 200 cm)


SLK Silver Sleep

viskoelastische Komfortmatratze mit SLK Touch of Silver Bezug



AUCH IN
SONDERGRÖSSEN
ERHÄLTlich

Ohne Randzonenverstärkung würde die Matratze bei Belastung unkontrolliert in ihrer Form nachgeben.

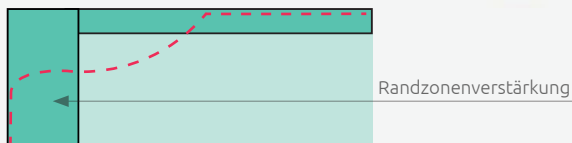

Mit Randzonenverstärkung bleibt sie stabil und gibt dem Patienten beim Aufstehen die Sicherheit und verhindert während des Liegens ein unplanmäßiges Abrutschen zur Seite.



Noppenstruktur wirkt Wärmestau entgegen



SLK Touch of Silver Bezug

Fakten

- profilierter, viskoelastischer Schaumstoff in 3-Zonen-Einteilung
- Einsinkverhalten mit Memo-Effekt
- optimale Druckentlastung durch unterschiedliche Härtezonen
- maximaler Komfort in jeder Liegeposition
- SLK Touch of Silver Bezug wirkt antimikrobiell und wird Hausstauballergikern empfohlen
- optimal auch für Pflegebetten geeignet

Technische Daten / Maße

- für Bettmaß:
90 x 200 cm, 100 x 200 cm
weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 15 cm
- Härtegrad: universal
- SLK Touch of Silver Bezug,

Lieferumfang

- SLK Silver Sleep Komfortmatratze, inkl. SLK Touch of Silver Bezug

**Artikel-ID 10079 (90 x 200 cm), 10080 (100 x 200 cm),
10083 (90 x 220 cm), 10084 (80 x 200 cm), 10085 (120 x 200 cm), 10086 (140 x 200 cm)
Sondermaße haben eine Lieferzeit von 6 bis 8 Wochen**

SLK Bi-Stretch-Bezug

Ersatzbezug für Schaumstoffmatratzen



AUCH IN
SONDERGRÖSSEN
ERHÄLTlich



flüssigkeitsabweisender
Reißverschluss

Fakten

- atmungsaktiv und flüssigkeitsundurchlässig
- hochwertige Polyurethan Beschichtung
- einfach zu reinigen / desinfizieren
- Reduzierung von Reibung und Scherkräften

Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 x 12 cm
- für Bettmaß: 100 x 200 x 12 cm
- für Bettmaß: 90 x 200 x 15 cm
- für Bettmaß: 100 x 200 x 15 cm
- SLK Bi-Stretch-Bezug,
flüssigkeitsundurchlässig,
waschbar bis 60° C

Lieferumfang

- Polyurethan-beschichteter SLK Bi-Stretch-Bezug
mit flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss

**Artikel-ID 1838 (90 x 200 x 12 cm), 1912 (100 x 200 x 12 cm), 1839 (90 x 200 x 15 cm),
1915 (100 x 200 x 15 cm)**

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

SLK Touch of Silver Bezug

Ersatzbezug für Schaumstoffmatratzen



AUCH IN
SONDERGRÖSSEN
ERHÄLTlich



Hautfreundliche Struktur

Fakten

- wirkt antimikrobiell und wird Hausstauballergikern empfohlen
- Doppel Bezug mit verarbeiteten Silver Baumwollfasern
- besonders hochwertiger und starker Bezug
- schützt vor unerwünschten Mikroorganismen
- optimale feuchtigkeits- und temperaturregulierende Eigenschaften

Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 x 12 cm
- für Bettmaß: 100 x 200 x 12 cm
- für Bettmaß: 90 x 200 x 15 cm
- für Bettmaß: 100 x 200 x 15 cm
- Bezug waschbar bis 60° C

Lieferumfang

- SLK Touch of Silver Bezug

#workgreen

Artikel-ID 2062 (90 x 200 x 12 cm), 2114 (100 x 200 x 12 cm), 2115 (90 x 200 x 15 cm),
2116 (100 x 200 x 15 cm)

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

SLK Evakuierungstuch

Evakuierungstuch für den Ernstfall



SLK Evakuierungstuch



Transport-Gurtgriff

Fakten

- Anbringung an die Matratze mit Hilfe von starken Elastikbändern
- Sicherheitsgurte zum Fixieren von Patienten
- 8 Gurtgriffe geben nötige Flexibilität beim Transport
- rückenschonend für das Pflegepersonal
- ergibt eine biegsame Kombination von rutschfestem Tuch und Matratze
- Kein Umbetten des Patienten notwendig

Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 cm
- Sondermaß: auf Anfrage
- PVC beschichtetes Polyestergewebe, waschbar bis 60° C

Lieferumfang

- SLK Evakuierungstuch

Artikel-ID 2131 (90 x 200 cm), Sondermaß (auf Anfrage)

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

SLK Evakuierungsbezug

Matratzenbezug für Evakuierungsmatratzen



untere Bezugseite



verstellbare
Gurtverschlüsse

Fakten

- an Matratze angebunden und somit zeitsparend
- durch stabilen und reibungsarmen Boden des Evakuierungsbezugs lässt sich die Matratze leicht über Böden ziehen
- 8 Gurtgriffe geben nötige Flexibilität beim Transport
- rückschonend für das Pflegepersonal
- Gurte geben der Matratze schützende U-Form
- optimale Verbindung von Liegekomfort mit hygienischen Ansprüchen
- obere Bezugseite: hochwertige Polyurethan Beschichtung
- untere Bezugseite: Nylonstoff, geprüft nach DIN 4102 B1
- atmungsaktiv und flüssigkeitsundurchlässig
- Reduzierung von Reibung und Scherkräften
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5

Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 x 15 cm, 100 x 200 x 15 cm
- Sondermaß: auf Anfrage
- Höhe: 15 cm
- SLK Bi-Stretch / Nylon-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig, waschbar bis 60° C


Lieferumfang

- SLK Evakuierungsbezug (SLK Bi-Stretch / Nylon-Bezug)

Artikel-ID 2126 (90 x 200 x 15 cm), 2127 (100 x 200 x 15 cm), 2195 Sondermaß (Lieferzeit von ca. 3 Wochen)

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

Chemothermische Aufbereitung im eigenen **SLK Hygienecenter**

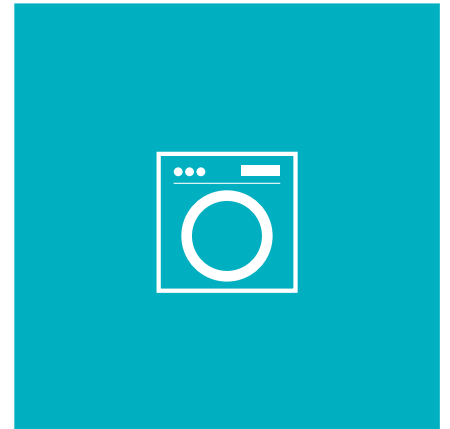

Chemothermische Aufbereitung

SLK Hygienecenter

Hochwertige Antidekubitus-Systeme werden für den Wiedereinsatz beim Patienten gereinigt und desinfiziert. Die sichere und nachvollziehbare hygienische Aufbereitung ist hier eine besondere Herausforderung.

SLK hat in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Mutters von der Universität Marburg ein validiertes Aufbereitungsverfahren entwickelt, welches nicht nur sicher Krankheitserreger bekämpft, sondern gleichzeitig das Material schont, und so einelange Lebensdauer der Hilfsmittel gewährleistet.

Die moderne Anlage zur Chemothermischen Aufbereitung nutzt eine Kombination aus Temperatur und Chemikalien, welche sich nach den Vorgaben des Robert Koch Institut richtet. Die Wirksamkeit unseres Waschverfahrens wird regelmäßig vom Hygieneinstitut Hohenstein überwacht.

Die Anlage ist konsequent in eine reine und eine unreine Seite getrennt. Stark verschmutzte Bestandteile (beispielsweise Bezüge und Transporttaschen) werden in speziellen Waschmaschinen gereinigt, während Luftkammern und Unterbauten in einer automatisierten Wasch- und Desinfektionsstraße aufbereitet werden. Dieses Verfahren gewährleistet minimale mechanische Belastung bei maximaler hygienischer Wirksamkeit.

Nach erfolgter Desinfektion gelangen die Systeme in die reine Seite. Hier werden Funktionskontrollen und messtechnische Prüfungen durchgeführt. Abschließend werden die Systeme in atmungsaktive Hygienebeutel verpackt, versiegelt und zusammen mit einem Hygienezertifikat in neuen Kartonagen zum Kunden geschickt.


Bei weiteren Fragen zur Aufbereitung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



#workgreen

Für Informationen über unsere **SLK Patientenlifter**

fordern Sie bitte unsere Lifterbroschüre an,
oder schauen Sie unter **www.slk-gmbh.de**

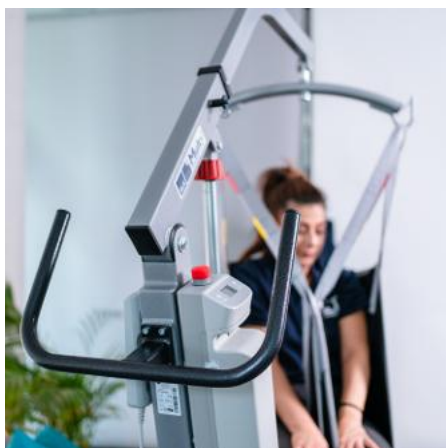



Produkte

- Lagerungssysteme zur Dekubitusprophylaxe und Therapie
- Systeme zur Apparativen Intermittierenden Kompressionstherapie mit entsprechenden Mehrkammermanschetten für verschiedene Anwendungsgebiete
- Patientenlifter für Patienten mit krankheits- oder behinderungsbedingter Mobilitätseinschränkung

Service

- schnelle Lieferung von Produkten
- sichere und zeitnahe chemothermische Aufbereitung und Prüfung von Antidekubitussystemen nach validiertem Verfahren
- regelmäßige Kontrolle der Aufbereitung durch ein international anerkanntes Hygieneinstitut
- aufbereitete Systeme werden in atmungsaktive Hygienebeutel verpackt, versiegelt und in neuen Kartons verschickt
- Wartung und Reparatur von SLK®-Produkten
- Aufbereitung mit Wartung und Ableitstromprüfung gem. DIN EN 62353
- Reparatur von Fremdsystemen auf Anfrage
- hohe Sicherheit beim Wiedereinsatz

Schulung

- Produktschulungen zu unseren SLK®-Systemen
- Schulungen zum Thema Dekubitus (Ursachen, Therapieformen usw.)
- Apparative Intermittierende Kompressionstherapie (Produkt- und Anwenderschulung für SLK®-Produkte)
- Patientenlifter für den Einsatz in Kliniken, Pflegeinstitutionen und im Homecare-Bereich



Wellell Group

SLK Vertriebsgesellschaft mbH
Am Herdicksbach 18
D-45731 Waltrop

Telefon: +49 (0) 2309 - 91545 - 0
Telefax: +49 (0) 2309 - 91545 - 999
E-Mail: info@slk-gmbh.de
Internet: www.slk-gmbh.de
Revision: 005 - 08/2026

 **@SLK Medizintechnik**

 **slk_medizintechnik**